

LMarte™

LM

feel the
difference



SCULPTEZ DES CHEFS-D'OEUVRE

LMArte™



POUR UNE STRATIFICATION ESTHÉTIQUE RÉUSSIE

LM-Arte™ est un ensemble d'instruments innovants pour les restaurations esthétiques, spécialement conçus pour la stratification des composites. Chaque instrument porte un code de couleur et un nom correspondant à sa fonction principale qui permettent des traitements de restauration simples, efficaces et rapides. Le manche LM léger et ergonomique, associé à une extrémité fabriquée avec des matériaux de grande qualité, offre une excellente sensibilité tactile et une grande simplicité de manipulation, pour des résultats cliniques optimaux.

COLLABORATION AVEC STYLEITALIANO™

La gamme d'instruments LM-Arte™ a été développée en collaboration avec Styleitaliano™, un groupe de dentistes qualifiés qui partagent notre détermination à améliorer la dentisterie.

Le mouvement Styleitaliano™ est le fruit d'une idée toute simple née dans l'esprit de deux amis, Walter Devoto et Angelo Putignano. Ces experts renommés en dentisterie conservative et esthétique avaient remarqué que, malgré la disponibilité de matériaux adaptés à la création de belles restaurations directes, les instruments permettant de les employer avec succès manquaient toujours.



Styleitaliano™ est une communauté grandissante de praticiens dentaires qualifiés qui contribuent, par leurs idées, à améliorer la simplicité et la prévisibilité des procédures dentaires quotidiennes. Cette communauté touche aujourd'hui des milliers de dentistes sur les réseaux sociaux avec des vidéos illustratives de démonstration, des cours et des conférences. Pour en savoir plus sur la philosophie de Styleitaliano™, consultez le site www.styleitaliano.org et participez au succès !



Suivez et rejoignez
la communauté
Styleitaliano™ sur
Facebook et Instagram



LMArte™ Solo - UN DUO D'INSTRUMENTS POUR SIMPLIFIER LES CAS DE ROUTINE

NOUVEAU !

POURQUOI ?

Ces instruments sont parfaits pour simplifier les cas courants de dentaire : deux instruments suffisent pour effectuer la plupart de vos restaurations de grande qualité antérieures et postérieures.

QUOI ?

Les instruments LMArte™ Solo simplifient toutes les opérations, du modelage à l'ergonomie, et même de l'hygiène, en réduisant le nombre d'instruments présents sur le plateau. Simplifiez votre instrumentation de restauration grâce à ce duo qui sera suffisant pour vos cas courants de restauration composite directe postérieurs et antérieurs.



Pour en savoir plus, lisez les pages suivantes et consultez le site Internet de LM à l'adresse www.lm-dental.com/LM-Arte

UNE GAMME D'INSTRUMENTS COMPLÈTE



LM-Arte™ Applicata

LMErgoSense® LM 46-49 ES

LMErgoMax™ LM 46-49 XSI



LM-Arte™
Applicata Twist

LMErgoSense® LM 464-494 ES

LMErgoMax™ LM 464-494 XSI



LM-Arte™ Modella

LMErgoSense® LM 442-443 ES

LMErgoMax™ LM 442-443 XSI



LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 488-489 ES

LMErgoMax™ LM 488-489 XSI



LM-Arte™ Misura

LMErgoSense® LM 496-497 ES

LMErgoMax™ LM 496-497 XSI



LM-Arte™

Posterior Misura

LMErgoSense® LM 498-499 ES

LMErgoMax™ LM 498-499 XSI



LM-Arte™
Cusp Misura

LMErgoSense® LM 468-469 ES

LMErgoMax™ LM 468-469 XSI



LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense® LM 481-487 ES

LMErgoMax™ LM 481-487 XSI



LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense® LM 307-308 ES

LMErgoMax™ LM 307-308 XSI



LM-Arte™
Solo Anterior

LMErgoSense® LM 431-433 ES

LMErgoMax™ LM 431-433 XSI



LM-Arte™
Solo Posterior

LMErgoSense® LM 434-438 ES

LMErgoMax™ LM 434-438 XSI

DES KITS D'INSTRUMENTS SÉLECTIONNÉS POUR VOS RESTAURATIONS UNIQUES



LM-Arte™ Set

Kit complet d'instruments pour les restaurations antérieures dans une cassette LM-Servo™ 5 comprenant

- LM-Arte™ Eccesso,
- LM-Arte™ Misura,
- LM-Arte™ Fissura,
- LM-Arte™ Applicca,
- LM-Arte™ Condensa.

LMErgoSense® LM 6840 ES

LMErgoMax™ LM 6840 XSI



LM-Arte™ Posterior Set

Kit complet d'instruments pour les restaurations postérieures dans la cassette LM-Servo™ 5 comprenant

- LM-Arte™ Posterior Misura,
- LM-Arte™ Cusp Misura,
- LM-Arte™ Fissura,
- LM-Arte™ Modella,
- LM-Arte™ Condensa.

LMErgoSense® LM 6844 ES

LMErgoMax™ LM 6844 XSI



LM-Arte™ Complete Set

Kit complet d'instruments pour tous les cas de restaurations dans une cassette LM-Servo™ 8 comprenant

- LM-Arte™ Eccesso,
- LM-Arte™ Misura,
- LM-Arte™ Applicca,
- LM-Arte™ Posterior Misura,
- LM-Arte™ Cusp Misura,
- LM-Arte™ Fissura,
- LM-Arte™ Modella,
- LM-Arte™ Condensa.

LMErgoSense® LM 6848 ES

LMErgoMax™ LM 6848 XSI

Options de manche

Tous les instruments LM-Arte™ sont disponibles avec deux options de manche ergonomique :



LMErgoSense®

Le diamètre plus grand et la conception assurent une prise en main exceptionnelle et son ergonomie et son efficacité ont été démontrées lors de tests cliniques scientifiques. Ø 13,7 mm
Le manche est disponible avec une étiquette RFID LM DTS™ intégrée, fonctionnalité unique pour améliorer la gestion des stocks et la sécurité des patients. Pour en savoir plus, consultez le site www.dentaltracking.com.



LMErgoMax™

Le design ergonomique classique fonctionne parfaitement dans toutes les procédures cliniques et garantit une excellente sensibilité tactile. Ø 11,5 mm



NOUVEAU !

UN SEUL INSTRUMENT POUR LA RESTAURATION DIRECTE LM-Arte™ Solo Anterior

Un instrument pour des restaurations antérieures esthétiques de grande qualité. Les spatules arrondies et droites sont conçues pour le modelage des dents antérieures, en particulier des surfaces labiales.

Extrémité tranchante

Modelage de précision
Micromodelage
Repère de limite
Grattage

Bords droits

Grattage

Profil plat

Aplanissement
Uniforme

Profil convexe

Modelage en un point
Créez des dépressions
Créez un profil buccal
Créez un profil cervical
Accédez aux zones difficiles

Bord en angle

Définition
Grattage

Lame fine

Modelage proximal

Bords affûtés

Couper, fendre, séparer
Crêtes marginales

Pointe arrondie

Délimitation délicate
Façonnage cervical



UN SEUL INSTRUMENT POUR LES RESTAURATIONS POSTÉRIEURES LM-Arte™ Solo Posterior

Instrument conçu pour les restaurations composites postérieures de grande qualité. L'extrémité de fouloir est conçue pour l'obturation et le modelage des matériaux composites. L'extrémité tranchante permet le façonnage de l'anatomie de la surface occlusale.

Profil plat

Retrait d'un excédent important
Retrait d'un excédent moyen

Angulation

Accès aux cavités profondes

Extrémité plate

Fouloir

Bords semi-arrondis

Formation de pente
Retrait de l'excédent
Retrait de marge

Zone de sécurité pour remplissage

4-5 mm Sonde pour matériaux de remplissage

Profil effilé

Retrait d'un excédent fin
Modelage de pente
Anatomie secondaire

Extrémité tranchante

Modelage de précision
Micromodelage
Repère de limite
Grattage
Distribution du flux
Élimination des bulles




APPLIQUEZ DE MANIÈRE ÉLASTIQUE LM-Arte™ Applica

Une spatule très fine et flexible conçue pour l'application et le modelage esthétique du composite. L'extrémité de travail flexible permet de sculpter en douceur et avec précision les couches de composite pour imiter la forme naturelle de la dent. L'extrémité mince de l'Applica permet le modelage dans des espaces étroits ou contre la bande de matrice.



APPLIQUEZ EN UN TOUR DE MAIN LM-Arte™ Applica Twist

Particulièrement fine, souple et étroite pour le modelage du composite. L'Applica Twist s'utilise pour un modelage aisé dans les intervalles proximaux et les crêtes marginales de la matrice. Ses extrémités courbées permettent d'atteindre des zones difficiles sans compliquer la position de travail de la main.

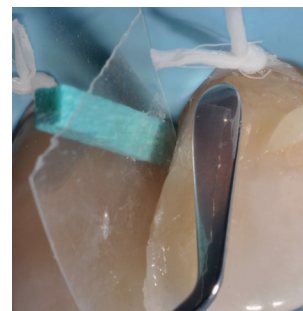

MODELEZ DE MANIÈRE FLEXIBLE LM-Arte™ Modella

Spatule particulièrement fine et large pour le modelage du composite. Particulièrement adaptée aux surfaces dentaires de grande dimension comme les surfaces buccales des incisives. La spatule large permet d'aplanir efficacement le composite. La flexibilité, la délicatesse et le tranchant de l'extrémité permettent de créer des détails esthétiques précis. La spatule permet d'appliquer efficacement le composite à l'aide d'une seringue.






POUSSEZ EN DOUCEUR

LM-Arte™ Condensa

Un fouloir allongé et arrondi, conçu spécialement pour modeler un composite. Ses bords recourbés permettent un accès libre à toutes les cavités. Le fouloir Condensa a une extrémité large et une extrémité fine utilisables dans des cavités de différentes tailles, dans les deux régions antérieure et postérieure. L'extrémité de travail arrondie permet un compactage délicat du composite sans risque d'adhérence.

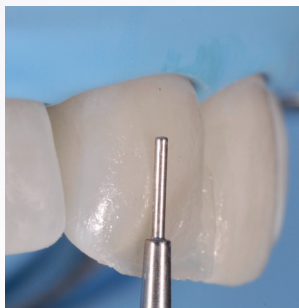

APPLIQUEZ DE MANIÈRE HOMOGÈNE

LM-Arte™ Misura

Un instrument unique, utilisé pour appliquer les épaisseurs horizontales et verticales correctes de couches de composite sur les restaurations antérieures. Après stratification, mais avant

polymérisation du composite de dentine, l'extrémité cylindrique, plus mince, se place sur l'émail naturel de la dent. Le composite non polymérisé sous l'embout cylindrique est ensuite doucement modelé tout en laissant un espace optimal pour la couche de composite d'émail. L'extrémité plus large et plus courte du Misura est placée horizontalement au bord de la cavité préparée, laissant le bord de l'extrémité sur l'émail d'origine. On peut ainsi déterminer la quantité adéquate de composite transparent à appliquer à la finition. La restauration esthétique finale consiste en des composites opaques et translucides correctement équilibrés, évitant l'aspect gris déplaisant de certains composites.





COMBLEZ DE MANIÈRE HOMOGENÈ

LM-Arte™ Posterior Misura

Version postérieure de l'instrument populaire Misura. Conçu pour fournir l'épaisseur verticale requise des couches de composite lors des restaurations postérieures. L'extrémité fourchue de l'instrument permet de modeler la paroi proximale de manière à reproduire la hauteur et l'anatomie de la dent voisine avec la présence d'une matrice.




NOUVEAU !

ÉVALUER EXPLICITEMENT

LM-Arte™ Cusp Misura

Un instrument unique pour estimer l'épaisseur et la hauteur de cuspide afin d'évaluer la nécessité de préparer la cuspide pour des restaurations adhésives. Idéal pour évaluer la résistance de la structure naturelle de la dent et choisir la technique de restauration à utiliser. Si l'extrémité fourchue de l'instrument pénètre jusqu'à son repère, la structure de la dent est trop faible pour supporter les forces occlusives avec une restauration directe, et d'autres options cliniques doivent donc être envisagées.



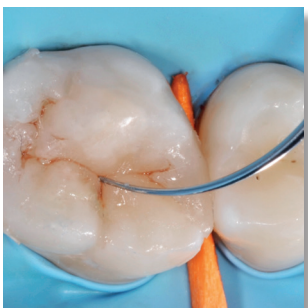

SCULPTEZ AVEC DÉLICATESSE

LM-Arte™ Fissura

Un instrument de modelage à extrémités pointues extrêmement tranchantes. L'extrémité conique est parfaite pour sculpter l'anatomie de la zone occlusive des dents postérieures avec un seul instrument. L'extrémité fine en forme de sonde est optimale pour le modelage des fissures et des bosses arrondies ainsi que pour la stratification des composites et des résines de scellement.

La flexibilité de l'instrument Fissura permet un sondage délicat afin de vérifier l'absence d'excédent de résine de fixation sur les surfaces dentaires.



FINITIONS NETTES

LM-Arte™ Eccesso

Un instrument conçu pour l'élimination des résidus de composite et de collage. Les extrémités de travail spéciales recourbées de l'instrument Eccesso sont idéales pour le retrait de l'excédent dans les régions antérieures cervicales et molaires interproximales. Cet instrument fin mais robuste est caractérisé par la longueur, l'épaisseur et la largeur optimisées de sa lame.



Consultez le site Internet de Styleitaliano™ à l'adresse www.styleitaliano.org pour découvrir des cas cliniques de restauration avec utilisation des instruments LM™.



RELEVER LE DÉFI DE LA RÉCESSION GINGIVALE - LMGengiva™

L'objectif du traitement de restauration d'une lésion cervicale est d'obtenir un rebord parfaitement étanche, une forte liaison et un polissage optimal du matériau composite. La rétraction gingivale mécanique lors des restaurations cervicales peut être traumatique si elle n'est pas réalisée correctement.

L'instrument LM-Gingival™ avec rétracteurs gingivaux est utilisé pour éviter de blesser inutilement la gencive et obtenir le meilleur résultat clinique possible. Grâce à cette méthode, le résultat final souhaité est atteint : les tissus mous ne sont pas endommagés et les besoins esthétiques sont satisfaits.



LM-Gengiva™ Kit de rétraction gingivale

LMErgoSense® LM 7556K ES

LMErgoMax™ LM 7556K XSI



Inclut l'instrument à main LM-Gingiva™, des rétracteurs gingivaux bleus (environ 90 pièces, 30 pièces par taille) et le LM-MultiLever™ pour le retrait des extrémités de travail en plastique



RÉTRACTEURS GINGIVAUX

- Écartez la gencive du site de restauration
- L'extrémité en plastique dur permet une bonne rétraction
- Les extrémités en plastique offrent une certaine flexibilité pour une meilleure adaptation
- L'embout fait office de joint étanche entre la gencive et la dent
- Protège la gencive et réduit le risque de décollement
- L'interface de liaison et le rebord gingival sont parfaitement visibles ; contraste idéal avec les tissus mous.
- Peut être personnalisé avec une fraise pour une racine convexe ou concave
- Aucune adhérence des matériaux adhésifs à la surface des embouts
- Aucune interférence avec la polymérisation
- Jetable

LM Dental™



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlande

Tél. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Distribué exclusivement par Curion



curion
formerly Bisco Canada

2571 Smith Street Richmond, BC., V6X 2J1 Canada

EN: 1.800.667.8811 | FR: 1.800.211.1200

curion.ca | wecare@curion.ca

