



Digital Body Weight Scale
EB4074C

QUICK START GUIDE


EN

DE

ES

FR

IT

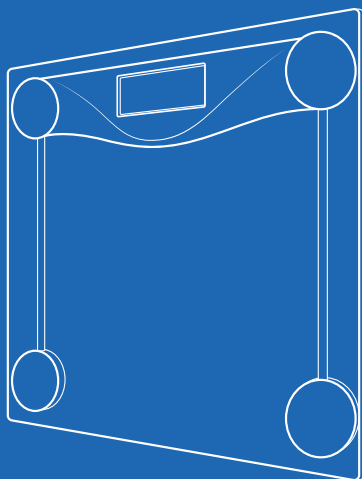

QUICK START GUIDE

SPECIFICATIONS

Weight Capacity	180 kg / 28 st / 400 lb
Increments	0.1 kg / 0.2 lb
Weight Units	kg / st / lb
Platform	Tempered glass
Dimensions	30 x 30 x 2.4 cm / 11.8 x 11.8 x 0.95 in
Battery Type	2 x 1.5V AAA batteries
Auto-Off	15 seconds

PACKAGE CONTENTS

- 1 x Digital Body Weight Scale
- 1 x Quick Start Guide
- 2 x 1.5V AAA Batteries (Pre-Installed)
- 1 x Measuring Tape

TIPS

- To switch between kilograms (kg), stone (st), and pounds (lb), press the unit switching button on the underside of the scale.
- If your scale has been moved or flipped upside down, it needs to be calibrated.
 1. Step on the scale until digits appear on the display, then step off.
 2. The scale will show “{” while calibrating, then “0.0” when complete.

USING YOUR SCALE

Note: Before first use, remove plastic strip from battery compartment.

1. Place scale on a hard, flat surface (not a carpet or mat).
2. Step onto the scale. The scale will automatically turn on and start measuring your weight.
3. Stand on the scale until the digits on the display flash 3 times, showing your final measurement.

ONLINE MANUAL



Need more help? Scan here to view the manual for more information.

You can also type the following link in a web browser:
www.etekcity.com/support/manual/model/eb4074c

WARRANTY

Etekcity Corporation warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service for 2 years, effective from the date of purchase to the end of the warranty period. Warranty lengths may vary between product categories.

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

CUSTOMER SUPPORT

Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.eu@etekcity.com

*Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

KURZANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Gewichtskapazität	180 kg / 28 st / 400 lb
Abstufungen	0,1 kg / 0,2 lb
Gewichtseinheiten	kg / st / lb
Standfläche	Hartglas
Abmessungen	30 x 30 x 2,4 cm / 11,8 x 11,8 x 0,95 Zoll
Batterietyp	2 1,5 V AAA-Batterien
Automatische Abschaltung	15 Sekunden

LIEFERUMFANG

- 1 Digitale Personenwaage
- 1 Kurzanleitung
- 2 1,5 V AAA-Batterien (vorinstalliert)
- 1 Maßband

DER GEBRAUCH IHRER WAAGE

Hinweis: Entfernen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch den Kunststoffstreifen vom Batteriefach.

1. Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Fläche (nicht auf Teppichboden oder eine Matte).
2. Stellen Sie sich auf die Waage. Die Waage schaltet sich automatisch ein und beginnt, Ihr Gewicht zu messen.
3. Bleiben Sie so lange auf der Waage stehen, bis die Zahlen auf dem Display dreimal mit Ihrem endgültigen Messwert aufblinken.

TIPPS

- Um zwischen Kilogramm (kg), Pfund (lb) und Stone (st) umzustellen, drücken Sie die Taste zur Umrechnung von Maßeinheiten an der Unterseite der Waage.
- Wurde Ihre Waage bewegt oder umgedreht, muss sie neu kalibriert werden.
 1. Drücken Sie mit einem Fuß auf die Waage, bis auf dem Display Zahlen erscheinen, und nehmen Sie den Fuß dann wieder von der Waage.
 2. Während der Kalibrierung zeigt die Waage „[“ an und „0.0“, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.

ONLINE-HANDBUCH



Benötigen Sie weitere Hilfe? Scannen Sie den QR-Code, um zur Bedienungsanleitung mit weiterführenden Informationen zu gelangen.

Sie können auch den folgenden Link in einen Web-Browser eingeben:

www.etekcity.com/support/manual/model/eb4074c

GARANTIE

Etekcity Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt werden und übernimmt die Garantie für Material- und Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Garantiefrist ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.eu@etekcity.com

*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ESPECIFICACIONES

Peso máximo permitido	180 kg (28 st, 400 lb)
Incrementos	0,1 kg (0,2 lb)
Unidades de peso	kg/st/lb
Plataforma	Vidrio templado
Dimensiones	30 x 30 x 2,4 cm (11,8 x 11,8 x 0,95 in)
Tipo de batería	2 pilas AAA de 1,5 V
Apagado automático	15 segundos

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x báscula de peso corporal digital
- 1 x guía de inicio rápido
- 2 x pilas AAA de 1,5 V (incluidas)
- 1 x cinta métrica

USO DE LA BÁSCULA

Nota: Antes de usarla por primera vez, retire la pestaña de plástico del compartimento de la pila.

1. Coloque la báscula sobre una superficie dura y lisa (no una alfombra).
2. Súbase a la báscula. La báscula se encenderá automáticamente y empezará a calcular su peso.
3. Manténgase en la báscula hasta que los dígitos parpadeen 3 veces en la pantalla, mostrando su peso final.

CONSEJOS

- Pulse el botón de cambio de unidades situado en la parte inferior de la báscula para cambiar de unidad: de kilos (kg) a stones (st) o a libras (lb).
- Si su báscula se ha movido o la ha puesto boca abajo, repita la calibración.
 1. Súbase a la báscula y espere a que aparezcan los dígitos en la pantalla y a continuación bájese.
 2. En la pantalla de la báscula aparecerá el símbolo "L" durante la calibración y "0.0" cuando esta termine.

MANUAL EN LÍNEA



¿Necesita más ayuda? Escanee aquí para consultar el manual para más información.

También puede introducir el siguiente enlace en un navegador web:

www.etekcity.com/support/manual/model/eb4074c

GARANTÍA

Etekcity Corporation garantiza la máxima calidad de todos los productos en cuanto a material, fabricación y servicio durante 2 años desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía. La duración de la garantía puede variar en función de la categoría del producto.

Si tiene algún problema o dudas relacionadas con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico:
support.eu@etekcity.com

*Antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente, tenga a mano su factura y número de pedido.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de pesage	180 kg / 28 st / 400 lb
Incréments	0,1 kg (0,2 lb)
Unités de poids	kg / st / lb
Plate-forme	Verre trempé
Dimensions	30 x 30 x 2,4 cm / 11,8 x 11,8 x 0,95 po
Type de piles	2 piles AAA de 1,5 V
Désactivation automatique	15 secondes

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 balance numérique
- 1 guide de démarrage rapide
- 2 piles AAA de 1,5 V (pré-installées)
- 1 ruban à mesure

UTILISATION DE VOTRE BALANCE

Remarque : retirez la languette en plastique du compartiment à piles avant l'utilisation.

1. Placez la balance sur une surface dure et plate (et non sur de la moquette ou un tapis).
2. Montez sur la balance. La balance s'allume automatiquement et calcule votre poids.
3. Restez debout sur la balance jusqu'à ce que les chiffres à l'écran clignent 3 fois, ce qui indique votre mesure finale.

CONSEILS

- Pour passer des kilogrammes (kg), aux stones (st) et aux livres (lb), appuyez sur le bouton de conversion des unités situé sous la balance.
- Si votre balance a été déplacée ou retournée, elle doit être recalibrée.
 1. Montez sur la balance, attendez que les chiffres s'affichent à l'écran, puis descendez de la balance.
 2. La balance affiche « [] » pendant le calibrage, puis « [] » pour indiquer la fin du calibrage.

MANUEL EN LIGNE



Besoin d'aide ? Scannez ce code pour consulter le manuel et obtenir de plus amples informations.

Vous pouvez également saisir le lien suivant dans un navigateur Web :

www.etekcity.com/support/manual/model/eb4074c

GARANTIE

Etekcity Corporation garantit la plus haute qualité des matériaux, de la main-d'œuvre et du service associés à tous ses produits, pendant 2 ans à partir de la date d'achat. La durée de garantie est susceptible de varier selon la catégorie de produit.

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client qui vous viendra en aide.

SERVICE CLIENT

Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
ÉTATS-UNIS

E-mail : support.eu@etekcity.com

*Munissez-vous de votre facture et de votre numéro de commande avant de contacter notre service client.

GUIDA DI AVVIAMENTO RAPIDO

SPECIFICHE

Portata	180 kg (28 stone / 400 libbre)
Incrementi	0,1 kg (0,2 libbre)
Unità di peso	kg (st / lb)
Pedana	Vetro temperato
Dimensioni	30 x 30 x 2,4 cm (11,8 x 11,8 x 0,95 pollici)
Tipo di batteria	2 batterie AAA 1,5 V
Spegnimento automatico	15 secondi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 bilancia pesapersona digitale
- 1 guida di avviamento rapido
- 2 batterie di tipo AAA 1,5 V (preinstallate)
- 1 metro a nastro

USO DELLA BILANCIA

Nota: prima di utilizzare la bilancia per la prima volta, togliere la linguetta in plastica dal vano batterie.

1. Sistemare la bilancia su una superficie dura e piatta (non sulla moquette o un tappetino).
2. Salire sulla bilancia. La bilancia si accende automaticamente e inizia a misurare il peso.
3. Rimanere fermi sulla bilancia fino a quando le cifre del display lampeggiano 3 volte e visualizzano il peso definitivo.

CONSIGLI

- Per passare da chilogrammi (kg) a stone (st) o a libbre (lb), premere il pulsante dell'unità di misura situato sotto la bilancia.
- Se la bilancia è stata spostata o capovolta, deve essere calibrata.
 1. Sali sulla bilancia fino a quando si visualizzano delle cifre sul display; a questo punto, scendi.
 2. Sul display della bilancia compare " [" durante la calibrazione, e poi " 0.0 " al termine della calibrazione.

MANUALE ONLINE



Hai bisogno di ulteriore assistenza? Scansionare il codice per visualizzare il manuale e ottenere maggiori informazioni.

In alternativa, digitare il seguente link in un browser:
www.etekcity.com/support/manual/model/eb4074c

GARANZIA

Etekcity garantisce la più alta qualità di tutti i suoi prodotti per quanto riguarda materiali, lavorazione e assistenza, per 2 anni a partire dalla data d'acquisto e fino alla scadenza del periodo di garanzia. La durata della garanzia può variare per le diverse categorie di prodotti.

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI

Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.eu@etekcity.com

*Consigliamo di avere a portata di mano la fattura e il numero d'ordine prima di contattare l'Assistenza Clienti.

