

Les instruments d'extraction sont fournis dans une cassette pratique, qui protège à la fois l'instrument et la personne qui le manipule pendant le cycle d'entretien. La cassette évite que les instruments ne perforent la poche de stérilisation pour optimiser leur stérilité. La cassette peut être marquée d'un code couleur par des boutons d'identification.

Pierre à affûter LM 818002

Les lames, finies à la main et fabriquées en acier supérieur LM-DuraGradeMAX, conservent leur tranchant très longtemps lorsqu'elles sont utilisées et entretenues correctement. Aiguisez les instruments d'extraction occasionnellement à l'aide de cette pierre à aiguiser ronde; une méthode simple et rapide pour les maintenir en parfait état et toujours prêts à l'emploi.



Elévateurs à racines

Root Tip Pick LM 769-771 ES/XSI

- pour enlever les apex de la racine
- excellent pour des traitements des zones difficiles
- disponible avec le manche LM-ErgoSense (ES) et LM-ErgoMax (XSI)

LM-RootOut LM 812210

- conçu pour les traitements préparatifs très délicats de la racine
- n'est pas recommandé pour retirer des parties d'apex plus solides
- similaire aux instruments Heidbrink
- manche ergonomique pour une prise en main confortable







Distribué exclusivement par Curion

2571 Smith Street Richmond, BC., V6X 2J1 Canada EN: 1.800.667.8811 | FR: 1.800.211.1200 curion.ca | wecare@curion.ca



LMLiftOut


Instruments de luxation pour une extraction atraumatique

Les instruments LM-LiftOut permettent de pratiquer l'extraction dentaire de façon aussi atraumatique que possible. Cet aspect est important pour permettre une cicatrisation rapide et le placement du futur implant. La pointe fine de l'instrument est introduite dans l'espace parodontal et lentement poussée vers l'apex tout en pivotant doucement l'instrument d'avant en arrière. L'instrument LM-LiftOut ne doit pas être utilisé comme un élévateur.





Angulations et dimensions

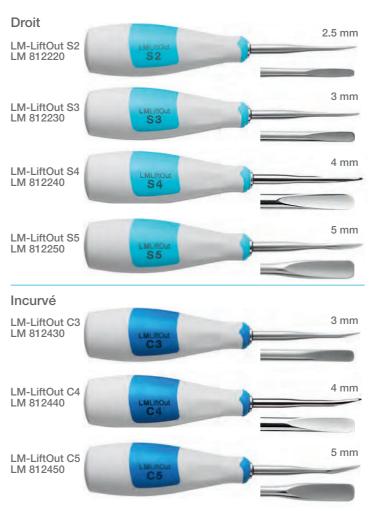

Extrayez avec sécurité & pour des luxations atraumatiques

l'ergonomie et la sensibilité tactile LM désormais la service des instruments d'extraction.

Caractéristiques	Avantages
Forme ergonomique	prise en main confortable et facilité de rotation
Surface sécurisée LM-ErgoTouch	une prise légère qui ne glisse pas
Bon équilibre	contrôle de la prise en main
Léger	moins fatiguant à manipuler
Code couleur clair	identification facile
DuraGradeMAX	inserts résistants et aiguisés
Joint étanche à la jonc- tion avec l'insert	hygiénique



Les instruments d'extraction LM ont été élus Meilleur produit de l'année 2014.



Scannez le code QR!

LMSlimLift

Instruments de luxation destinés pour les espaces spécialement étroits.

Les instruments LM-SlimLift sont particulièrement conçus pour atteindre les zones difficiles d'accès qui ne sont pas accessibles par les instruments de luxation traditionnels. Ils permettent de pratiquer l'extraction dentaire de façon aussi atraumatique que possible. Cet aspect est très important pour une cicatrisation rapide. La pointe ultra fine de l'instrument est introduite dans l'espace parodontal très étroit et lentement poussée vers l'apex tout en pivotant doucement l'instrument d'avant en arrière. LM-SlimLift ne doit pas être utilisé comme un élévateur.



Le design extrêmement fin de la lame permet les extractions les plus atraumatiques.



Les instruments fins LM-SlimLift: une solution réellement atraumatique

MD, DDS, D.Med.Sc, Chirurgien dentaire Peter Jungell

« J'utilise actuellement les instruments LM-SlimLift pour la quasi-totalité des extractions que je pratique. J'utilise aussi mes instruments de luxation préférés, plus anciens, mais je dois avouer que l'utilisation des mes instruments traditionnels se fait de plus en plus rare.

L'instrument de luxation fin de LM peut particulièrement étroits. Lorsque j'utilise des instruments larges, la force de luxation est répartie sur une zone plus grande, sur les côtés et plus en bas vers l'extrémité des racines, de sorte que le risque de rupture des racines fragiles, notamment, est considérablement réduit. La majorité des extractions peuvent être réalisées avec des instruments de luxation sans qu'il soit nécessaire d'employer d'autres mesures opératoires.

grosse mais, dans la pratique clinique, j'ai la racine. »

remarqué qu'elle épousait parfaitement s'insérer dans des espaces parodontaux ma main. Il est ainsi possible de tenir l'instrument dans la paume de la main ou uniquement avec les doiats. Il est également facile de choisir l'instrument adapté à un besoin clinique particulier parmi les nombreuses tailles disponibles. Les lames larges conviennent à l'extraction des molaires inférieures tandis que les pointes étroites s'avèrent idéales, par exemple, pour extraire les racines étroites des dents du haut.

Je recommande les instruments LM-SlimLift à tous les dentistes : ils valent La conception et le revêtement de vraiment la peine que l'on abandonne l'instrument LM-SlimLift offrent une complètement nos vieux instruments excellente prise en main de l'instrument, qui ne fonctionnent plus très bien. On Lorsqu'on le saisit pour la première fois, entend trop souvent parler de cas où il on peut croire que sa poignée est trop a fallu près de deux heures pour traiter

Angulations et dimensions



LM-SlimLift S4 LM 812640

LM-SlimLift S5 LM 812650



Incurvé

LM-SlimLift C3 LM 812830

LM-SlimLift C4 LM 812840

LM-SlimLift C5 LM 812850





« Cet élévateur de LM-Instruments a été spécialement conçu pour les applications nécessitant de la force »

Bite Magazine, Août 2014 par Dr Davis Lakatos, Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australie

« J'ai découvert cet élévateur l'année dernière à l'occasion du Congrès dentaire australien de Melbourne. Comme nous exerçons en milieu rural et que nous réalisons probablement un peu plus d'extractions que dans un cabinet situé en ville, cet outil s'avère très pratique.

Je trouve que les luxateurs sont souvent trop fins et, si vous exercez une pression un peu trop forte, ils ont tendance à se courber ou à casser. Cet élévateur de LM-Instruments a été spécialement conçu pour les applications nécessitant de la force.

J'utilise cet élévateur pour toutes les extractions et je possède toute la gamme de modèles, droits et coudés, dans toutes les tailles disponibles. C'est un outil très simple et résistant qui facilite véritablement les extractions.

Je me suis souvent demandé pourquoi il n'existait pas de luxateur plus solide sur le marché... aujourd'hui, cet élévateur est exactement ce que je recherchais ».

Angulations et dimensions



